


FFP2 Atemschutzmasken

Für den einmaligen Gebrauch.

10 Stück

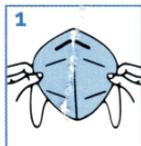

FFP2 NR – Model 4270001575944

BENUTZUNGSANWEISUNGEN

1. Orientieren Sie sich, welche Seite der Maske oben und welche unten ist.



2. Legen Sie die Schutzmaske an und drücken Sie den Metallstreifen der Maske unter dem Nasenbein zusammen, damit sie sich der Form Ihrer Nase anpasst.



3. Ziehen Sie die Unterseite der Maske etwas nach unten, sodass der Mund und das Kinn bedeckt sind.



4. Prüfen Sie den Sitz der Maske so, dass keine Nebenluft gezogen wird. Prüfen Sie eventuelle Nebenluft durch Gesichtsbehaarung. Korrigieren Sie ggf. den Sitz, bis die Maske dicht sitzt.

Die Atemschutzmasken dienen dem einmaligen Gebrauch. Bitte nach Gebrauch, bei Feuchtigkeit, bei sichtbaren Verunreinigungen oder bei ungenügender Passung durch eine neue, trockene, saubere und gut sitzende Maske ersetzen. Haltbarkeit des Produkts: 3 Jahre bei Lagerung bei Temperaturen von 5 °C bis + 25 °C und bei einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 60%. Die Maske entspricht DIN EN 149:2009-08 und der PSA-Verordnung EU 2016/425 und ist CE zertifiziert. Die Kennzeichnung NR bedeutet, dass die Maske für maximal eine Arbeitsschicht (8 Stunden) verwendet werden darf. Missachtung dieser Anweisungen oder falsche Anwendung können die Wirksamkeit der Maske reduzieren bzw. Erkrankungen oder dauerhafte Schäden zur Folge haben. EU Konformitätserklärung hier: <https://ppegermany.de/eu.html>

Produktion: 18.01.2021
Chargennummer: 20120901



Produziert von:

PPE Germany GmbH
Karlsruher Str. 18
D-10711 Berlin

Kontakt:

maske@ppegermany.de

Artikelnummer:

4270001576156


CE
2163



FFP2 Disposable Face Mask

For single use.

10 pieces

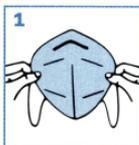

FFP2 NR – Model 4270001575944

USER INSTRUCTIONS

1. Place the mask in your hands with the top side facing upwards.



2. Put on the protective mask and press the metal part on the bridge of your nose, so that it adapts the shape of your nose.



3. Pull the bottom of the mask slightly down so that nose, mouth and chin are well covered.



4. Check the fit of the mask so that no secondary air is drawn in. Check facial hair for air leaks. If necessary, correct the fit until the mask fits comfortable and seals correctly.

The breathing masks are for single use.


Please dispense after use. Please dispense the mask in event of moisture, visible contamination or inadequate fit. Replace with a new, dry, clean and well-fitting FY20-05 mask. Shelf life of the product: 3 years when stored at temperatures from 5 ° C to + 25 ° C and at a maximum Humidity of 60%. The face mask complies with DIN EN 149: 2009-08 and PPE Personal Protective Equipment (PPE) – Regulation (EU) 2016/425. The NR marking means that the mask may be used for a maximum of one working shift (8 hours). Disregard of the instructions or incorrect application may reduce the effectiveness of the mask or result in illness or permanent damage.

EU declaration of conformity:

<https://ppegermany.de/eu.html>

Production: January 18, 2021

Batch number: 20120901

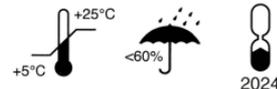

Produced by:

PPE Germany GmbH
Karlsruher Str. 18
D-10711 Berlin

Contact:

maske@ppegermany.de

Item number:

4270001576156

CE
2163

